

NEUES VITALOGRAPH PNEUMOTRAC

Das PC-Spirometer für die schnelle, einfache
und exakte Spirometrie in Praxis und Klinik



A Global Leader in Respiratory Diagnostics


PNEUMOTRAC PC-SPIROMETER

Nachhaltige Messtechnologiefür optimale
Hygiene und niedrige Folgekosten

Das neue Vitalograph® Pneumotrac™ ist ein einfach zu bedienendes und flexibel einsetzbares Spirometer für die zuverlässige Atemwegsdiagnostik bei Erwachsenen und Kindern.

Die hochwertige Messtechnologie liefert absolut präzise Messergebnisse und zeichnet sich durch Stabilität und Langlebigkeit für viele Jahre aus.


Die neue Spirotrac® 6 Software stellt sicher, dass Ihre Messungen alle Anforderungen des aktualisierten Spirometrie-Standards ATS/ERS-2019 in Bezug auf Messgenauigkeit und Reporting erfüllen.

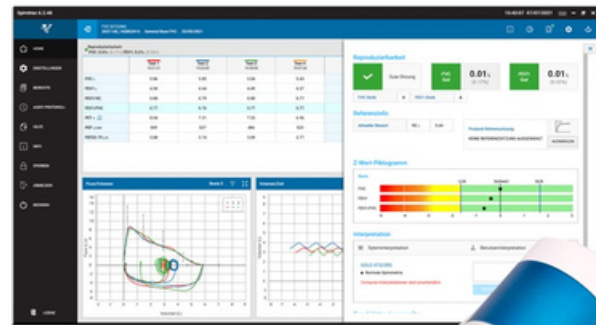

Funktionen und Vorteile

- Geringe Testkosten pro Patient durch nachhaltigen Messkopf vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“
- Erfüllung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene durch günstige BVF™ Bakterien-Viren-Filter und damit Sicherheit für Patienten und Personal (Covid-19)
- 5 Jahre Garantie bei kostenloser Produktregistrierung innerhalb von 30 Tagen ab Kauf
- Erleichterte Testdurchführung und Befundung (GLI, Z-Score, LLN, %Soll) durch neue Spirotrac 6 Software
- Animationen für Kinder und Interpretation der Messungen
- Feedbacks zur Testqualität gemäß ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard
- Einfache Anbindung an die Praxissoftware via GDT und HL7
- Spirotrac 6 Software um 12-Kanal-Ruhe-EKG mit Bluetooth erweiterbar
- Netzwerklizenz für 5 Messarbeitsplätze inklusive



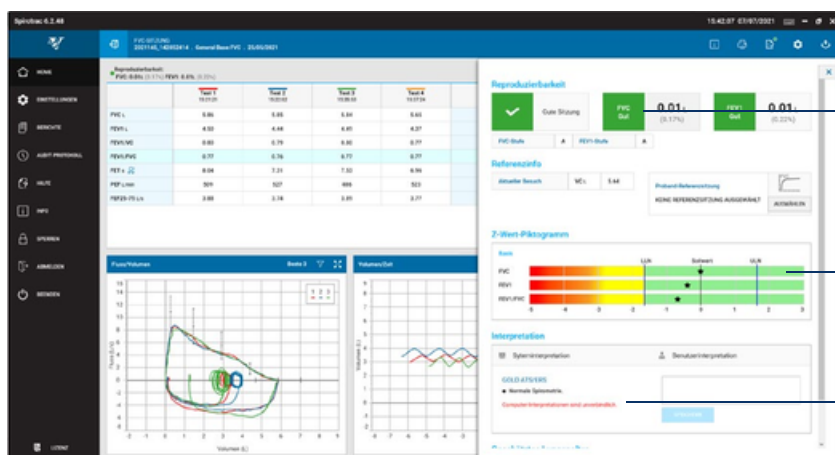

FVC- und FEV1-Einstufung gemäß aktuellem ATS/ERS-2019 Spirometrie-Standard


Graphische Z-Score-Darstellung zur Vereinfachung der Diagnostik

Interpretation auf Basis aktueller ATS/ERS- und GOLD-Leitlinien

BVF Bakterien-Viren-Filter

Zum Schutz von Patienten und Personalkommen Filter mit einer Effizienz von 99,999% gegenüber Bakterien und Viren (TBC, MRSA, Influenza, SARS-CoV-2 etc.) zum Einsatz. Damit arbeiten Sie auch in Covid-Zeiten sicher.

Außerdem profitieren Sie von sehr niedrigen Testkosten pro Patient, da keine weiteren Einmal-Artikel wie Adapter, Atemrohre oder andere Mundstücke benötigt werden.

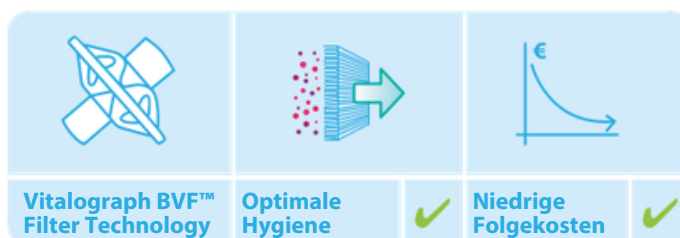


Vorteile der Vitalograph BVF™ Filter Technology

Kostengünstig um EKG erweiterbar

Die Spirotrac 6 Software enthält bereits ein EKG-Modul, welches einfach als Erweiterung freigeschaltet werden kann. Dabei profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- Eine Benutzeroberfläche für EKG und Spirometrie
- Eine Einbindung in die Praxissoftware
- Ein kompetenter Ansprechpartner für alles
- Preisersparnis - Sie zahlen nur für die EKG-Hardware

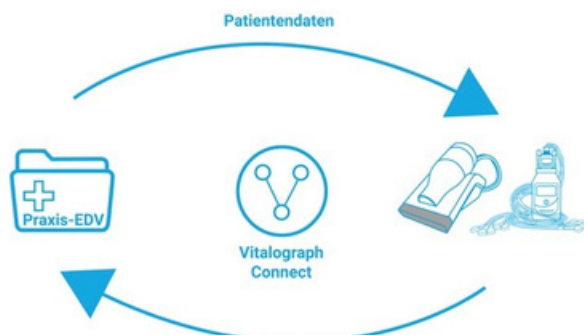

Für Interpretationen und Rhythmusanalysen kommt der Glasgow-Algorithmus zum Einsatz

Technische Daten

Produkt: Vitalograph Pneumotrac

Modellreihe: 6800

Fluss-Messverfahren:

Fleisch-Pneumotachograph

Volumen-Messverfahren:

Flussintegration bei 100Hz

Volumen-Messgenauigkeit: Innerhalb von $\pm 2,5\%$

Fluss-Messbereich:

Max. Flussrate ± 960 L/min (± 16 L/s)

Min. Flussrate $\pm 1,2$ L/min ($\pm 0,02$ L/s)

PEF-Messgenauigkeit: Innerhalb von $\pm 10\%$

Atemflusswiderstand: Weniger als 0,1 kPa/L/s bei 14 L/s

Arbeitstemperatur-Bereich: ISO-26782-Grenzwerte

17-37°C, Geräte-Grenzwerte 10-40°C

Leistungsstandards:

ATS/ERS-2019, ISO 23747:2015, ISO 26782:2009

QA/GMP-Standards: EN ISO 13485, FDA 21 CFR 820,

JPAL, MDSAP

Abmessungen:

160mm (Länge) x 95mm (Breite) x 115mm (Höhe)

Gewicht: 550g

Stromversorgung: 5V DC über USB

Bestellinformationen

Modellnummer	Bestellnummer	Produktbezeichnung
6800	77922	Vitalograph Pneumotrac mit Spirotrac 6 Software

Verbrauchsmaterial und Zubehör

Modellnummer	Bestellnummer	Produktbezeichnung	VE
2820	28350	BVF Bakterien-Viren-Filter	50
	28553	ECO-BVF Set mit Nasenklemme	75
2030	20303	Einmal-Nasenklemmen	200
2040	36020	Kalibrationspumpe 3 Liter als optionales Zubehör für das Praxis-QM	
4130	41300	Vitalograph B112 Ruhe-EKG ohne Software als Erweiterung für ein vorhandenes PC-Spirometer mit Spirotrac Software	

Vitalograph, Vitalograph®, Spirotrac®, Pneumotrac™ und BVF™ sind Marken oder eingetragene Marken von Vitalograph Ltd. Das Logo University of Glasgow ist eine eingetragene Marke der University of Glasgow



Kontakt

Unser kompetentes Service-Team berät Sie gern in allen Fragen zum Kauf und zur Bedienung unserer Produkte.

Deutschland, Österreich, Schweiz

Vitalograph GmbH

Tel.: +49 40 547391-0

Fax: +49 40 547391-40

info@vitalograph.de

Rellinger Straße 64a

20257 Hamburg

Deutschland

Irland

Vitalograph (Ireland) Ltd

Tel.: +353 65 686 4100 Fax:

+353 65 682 9289

sales@vitalograph.ie

Gort Road

Business Park Ennis, Co Clare,

V95 HFT4, Ireland

Vereinigtes Königreich

Vitalograph Ltd, UK

Tel.: +44 1280 827110

Fax: +44 1280 823302

sales@vitalograph.co.uk

Maids Moreton,

Buckingham, MK18 1SW,

England

USA & Kanada

Vitalograph Inc.

Toll Free: +1 800 2556626

Tel.: +1 913 730 3200 Fax:

+1 913 730 3232

contact@vitalograph.com

13310 West 99th Street

Lexexa, Kansas, 66215, USA

Alle anderen Länder

**Vitalograph Ltd,
International**

Tel.: +44 1280 827120

Fax: +44 1280 823302

sales@vitalograph.co.uk

Maids Moreton,

Buckingham, MK18 1SW,

England

Ihr Fachhandelspartner



vitalograph.de